

MODE D'EMPLOI

MASSEUR POUR PIEDS TRIPLE ACTION

A. MISES EN GARDE SANITAIRES

Consultez votre médecin avant d'utiliser l'appareil si vous vous trouvez dans une des situations suivantes :

- Grossesse
- Problèmes cardiaques, en particulier si vous portez un pacemaker
- Diabète
- Tuberculose
- Tumeurs bénignes ou malignes
- Doutes à propos de votre état de santé



N'utilisez pas l'appareil sur des parties du corps souffrant des pathologies énoncées ci-dessous sans l'accord de votre médecin :

- hémorragies,
- blessures,
- tuméfactions,
- éruptions cutanées,
- brûlures,
- varices,
- plaies ouvertes,
- zones présentant une mauvaise circulation sanguine,
- ecchymoses,
- écorchures, égratignures,
- phlébite,
- thrombose,
- parties du corps affectées par une paralysie ou une anesthésie, douleur inexplicable dans la zone concernée par le massage, dans les 72 heures suivant un incident musculaire ou articulaire.

B. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

VEUILLEZ LIRE INTÉGRALEMENT LES CONSIGNES CI-DESSOUS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL

1. DANGER

Afin de réduire les risques d'électrocution :

- 1) Débranchez toujours l'appareil de la prise électrique immédiatement après son utilisation et avant de le ranger ou de le nettoyer.
- 2) **N'UTILISEZ PAS** l'appareil dans votre bain ou pendant le sommeil.
- 3) **NE TENTEZ PAS** de récupérer l'appareil tombé dans l'eau. Débranchez-le immédiatement.
- 4) **N'IMMERGEZ PAS** l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- 5) **NE PLACEZ PAS** et ne conservez pas l'appareil dans un endroit où il risque de tomber dans une baignoire ou un évier.

- 6) **NE MONTEZ PAS** sur l'appareil.

2. ATTENTION

Afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution, de brûlure ou de blessure :

- 1) L'appareil ne doit jamais rester sans surveillance tant qu'il est branché. Débranchez l'appareil s'il n'est pas utilisé, avant de le ranger, de démonter des accessoires ou de le nettoyer.
- 2) Utilisez les surfaces chauffées avec précaution car elles peuvent causer de graves brûlures.
- 3) L'appareil comporte une surface qui peut devenir chaude. Les personnes qui sont insensibles à la chaleur doivent être prudentes lorsqu'elles utilisent l'appareil.
- 4) **N'UTILISEZ PAS** l'appareil sur des parties sensibles de la peau ou présentant une mauvaise circulation sanguine.
- 5) **N'UTILISEZ PAS** l'appareil si le cordon électrique ou la prise sont endommagés, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est endommagé ou s'il a séjourné dans l'eau.
- 6) **N'UTILISEZ PAS** l'appareil à l'extérieur. Cet appareil a été conçu pour un usage domestique exclusivement.
- 7) Tenez le cordon électrique à distance des surfaces chaudes, de l'eau ou de tout autre liquide.
- 8) **N'UTILISEZ PAS** l'appareil sous une couverture ou sous un oreiller. La chaleur excessive risque d'entraîner un incendie, une électrocution ou des blessures.
- 9) **NE TRANSPORTEZ PAS** l'appareil en le tenant par le cordon électrique et n'utilisez pas ce dernier comme une poignée.
- 10) Utilisez l'appareil exclusivement pour les usages indiqués dans le présent document.
- 11) **N'UTILISEZ PAS** d'accessoires non recommandés par le fabricant.
- 12) **N'INTRODUISEZ** pas et ne laissez aucun objet pénétrer dans les ouvertures de l'appareil.
- 13) **N'UTILISEZ PAS** l'appareil dans un endroit où des produits aérosols (spray) sont utilisés ou de l'oxygène administré.
- 14) Pour débrancher l'appareil, retirez la prise électrique après avoir mis toutes les commandes à l'arrêt.
- 15) **ATTENTION : N'UTILISEZ PAS** l'appareil pendant plus de 20 minutes sans interruption.
- 16) Ne mettez pas l'appareil en service lorsque vous constatez des dommages à l'appareil, au cordon électrique, ou lorsqu'il fonctionne mal, est tombé ou manifeste un dérangement d'une autre manière. Rapportez l'appareil complet à un électricien reconnu pour contrôle et/ou réparation. Exigez toujours des pièces originales. Le câble doit être remplacé par un câble de même type.




Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont diminuées, ou qui ne disposent pas des connaissances ou de l'expérience nécessaire, à moins qu'elles n'aient été formées et encadrées pour l'utilisation de cet appareil par une personne responsable de leur sécurité.

Les enfants doivent être surveillés afin qu'ils ne puissent pas jouer avec cet appareil.

Si vous ressentez un certain inconfort, éteignez le masseur pour pieds. Lors de la prochaine utilisation, nous vous recommandons de procéder à une séance n'excédant pas 10 minutes.

C. DESCRIPTION

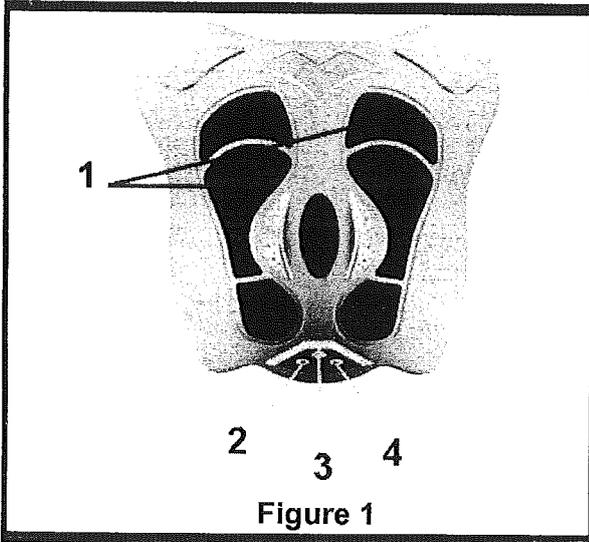

1. Zone infrarouge d'émission de chaleur du pied

2. Bouton ON/ OFF

3. Bouton d'accélération de la vibration

4. Bouton de réduction de la vibration

D. CARACTÉRISTIQUES

- Cet innovant massEUR pour pieds permet 3 actions prodiguant un bien-être:
 1. Massage vibrant pour décontracter,
 2. Chaleur infra rouge pour apaiser,
 3. Réflexothérapie pour stimuler le métabolisme.
- Intensité de massage vibrant et de chaleur infrarouge réglables
- Minuterie intégrée (durée : environ 15 à 20 minutes)

E. UTILISATION

1) Placez l'appareil sur un sol ferme et branchez le cordon d'alimentation dans une prise secteur.

2) Placez les deux pieds confortablement sur le massEUR.

NOTE : **NE MONTEZ PAS** sur le massEUR.

3) Pour mettre l'appareil **SOUS TENSION**, appuyez sur l'interrupteur **ON/ OFF**.

Pour mettre l'appareil **HORS TENSION**, appuyez de nouveau sur l'interrupteur **ON/ OFF**. (Cf. Figure 2).

4) Cet appareil offre 3 vitesses de vibration. La vibration à basse vitesse s'active lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur le bouton (2) une fois pour accélérer l'intensité (voir figure 2). Appuyez à nouveau sur le bouton pour passer à une vitesse plus élevée.

5) Appuyez sur le bouton (4) pour réduire la vibration.

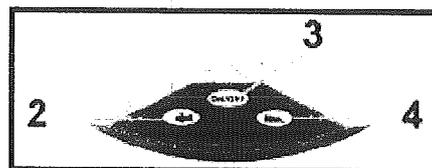


Figure 2

F. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

230V ~, 50Hz, 20W

G. ENTRETIEN

- Nettoyez le masseur pour pieds avec un chiffon sec ou une serviette sans eau. Les parties qui sont en contact direct avec la peau peuvent être désinfectées avec de l'alcool.
- N'utilisez pas de benzène ou d'autres solvants pour nettoyer.
- Rangez le masseur pour pieds à basse température, dans un endroit sec et aéré.

H. VÉRIFICATION DES PROBLÈMES

PROBLÈMES	SOLUTIONS
Appuyez sur ON/OFF, la zone infrarouge d'émission de chaleur ne s'allume pas.	<ol style="list-style-type: none">1. Vérifiez d'abord si l'appareil est sous tension.2. Mettez hors tension, puis à nouveau sous tension et vérifiez si tout est normal.3. Vérifiez si la prise d'alimentation est en contact avec la prise de courant.

ATTENTION : Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers. Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements. En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et doivent être recyclés.



Ce symbole indique que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective, il représente une poubelle sur roues barrée d'une croix.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.

Commercialisé par EUROTOPS VERSAND GMBH D-40764 LANGENFELD