

**GEBRAUCHSANWEISUNG ROLLATOR**  
**INSTRUCTION MANUAL ROLLATOR**  
**MODE D'EMPLOI DÉAMBULATEUR**  
**GEBRUIKSAANWIJZING WANDELKAR**



v.1\_1.08.07.2020



De wandelkar voor buitenshuis gebruik is voorzien van een parkeerrem en een zitting met gestoffeerde rugleuning. De hoogte van het handvat is verstelbaar en de wandelkar kan worden opgevouwen voor transport of opslag. Lees, voordat u de wandelkar voor het eerst monteert of gebruikt, zorgvuldig de gebruiksaanwijzing en bewaar deze op een veilige plaats. Vouw of gebruik het apparaat NIET totdat de gebruikershandleiding zorgvuldig is gelezen.

## BESLUIT

Het apparaat is bedoeld als hulpmiddel bij het wandelen, ondersteunen en dragen van kleine voorwerpen, zowel binnen als buiten. Het is bedoeld voor gebruik door de gebruiker met beperkte mobiliteit en een maximaal lichaamsgewicht, zoals hieronder aangegeven. Om de veiligheid van de wandelkargebruiker te garanderen, moeten gebruikers over de juiste fysieke, visuele en cognitieve vaardigheden beschikken. Neem bij twijfel contact op met de verkoper / specialist die het gebruik van de wandelkar heeft voorgeschreven. Het is erg belangrijk dat de gebruiker de veiligheidstips in deze gebruikershandleiding zorgvuldig leest voordat hij het apparaat voor het eerst gebruikt. De hier verstrekte tips zijn bedoeld om mogelijk lichamelijk letsel van de gebruiker of derden te voorkomen, evenals schade aan de wandelkar of voorwerpen eraan.

## TIP:

Ga niet op afzonderlijke delen van het frame staan. Het apparaatframe is niet bestemd voor dit doel.

## VEILIGHEID

De wandelkar kan worden gebruikt door een persoon met een maximaal gewicht van 135 kg.

## U MOET HET VOLGENDE IN ACHT NEMEN:

- (1) Zorg ervoor dat de parkeerrem van een onbewaakte wandelkar altijd vergrendeld / geactiveerd is.
- (2) Controleer voor gebruik of alle wielen, inclusief bewegende wielen, stevig zijn vastgemaakt.
- (3) Zorg ervoor dat de remmen goed werken.
- (4) Controleer voor het eerste gebruik de hoogte van de handgrepen en hun correct bevestiging.
- (5) Zorg ervoor dat de wandelkar volledig is uitgevouwen.
- (6) Na het uitklappen van de wandelkar moet het frame in de juiste positie staan.
- (7) Houd uw vingers uit de buurt van het vouwmechanisme om te voorkomen dat uw vingers gekneld raken.
- (8) Neem contact op met professionele medewerkers om de wandelkar aan uw behoeften aan te passen.
- (9) Wees voorzichtig bij het optillen of dragen van de wandelkar.



## HET VOLGENDE IS VERBODEN:

- (1) De wandelkar gebruiken om mensen te vervoeren – het apparaat is niet ontworpen als rolstoel.
- (2) Zitten op een wandelkar zonder geblokkeerde remmen – dit kan ertoe leiden dat de wandelkar beweegt en letsel kan veroorzaken bij de gebruiker of derden.
- (3) Zitten op de wandelkar wanneer deze is gekanteld zonder dat de parkeerrem is aangetrokken.
- (4) Achterloos op de stoel zitten – men moet voorzichtig en gecontroleerd zitten, vraag zo nodig om hulp.
- (5) Hang geen voorwerpen aan de remhendels of handvatten, dit kan de remmen en/of de stabiliteit van de wandelkar beïnvloeden.
- (6) Op de wandelkar staan of deze te gebruiken als voetensteun.

## BOUW INSTRUCTIES

Zorg ervoor dat de wandelkar tijdens het transport niet is beschadigd. Gebruik de wandelkar niet als er schade zichtbaar is. Neem in dergelijke gevallen contact op met de verkoper om de wandelkar te laten herstellen of te retourneren.



- A – Rugleuning
- B – Remhendel
- C – In hoogte verstelbare handvatten
- D – Stoel
- E – Tas
- F – Diameter achterwiel 30 cm
- G – Diameter voorwiel 30 cm



1. Verwijder de verpakking. De wandelkar is opgevouwen

2. Klap de wandelkar uit, duw de stoel aan beide kanten naar beneden – Afb 4.  
TIP: Beide zijden moeten in de juiste positie worden vergrendeld, dit is hoorbaar door een "klik".



Afb 4

3. Hang de tas aan het frame.

## HOOGTE INSTELLING

### De juiste pasvorm

Voordat u de wandelkar voor het eerst gebruikt, moet u ervoor zorgen dat deze volledig is uitgevouwen en dat het frame goed is vergrendeld en stevig is. Het is belangrijk om de hoogte van de wandelkar goed en comfortabel in te stellen.

1. Om dit te doen, laat u uw armen opzij zakken en plaatst u de handgrepen van de wandelkar ter hoogte van de polsen.
2. Bij het vastpakken van de handgrepen moeten de ellebogen onder een hoek van 15°-20° zijn gebogen.
3. Als u gedwongen wordt om uw armen te buigen of op te heffen om de wandelkar te bereiken, pas dan de hoogte aan.
4. Draai hiervoor de duimschroef los en stel de hendel in op de juiste hoogte. Herhaal dit aan de andere kant van de wandelkar en controleer voor gebruik of beide handvatten op dezelfde hoogte zijn en goed zijn vergrendeld.





**TIP:** Neem contact op met uw arts of verkoper om de juiste hoogte van de wandelkar te bepalen.



## REMINSTELLING EN SERVICE

**Bedrijfsrem (bij duwen):** Trek de remhendel omhoog.

**Parkeerrem (tijdens het parkeren):** Duw de remhendel naar beneden (zie Afb. 5).

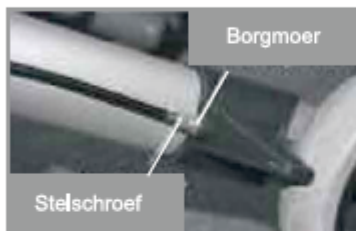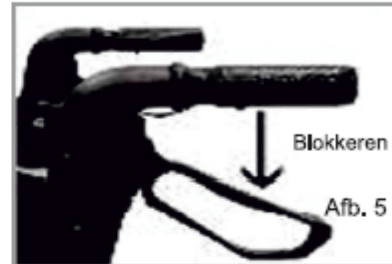

Afb. 6

**Remafstelling:** Om de spanning van de remkabel te verhogen, draait u de stelschroef in tegenwijzerzin en vervolgens – om deze instelling te behouden – draait u de klemknop in wijzerzin terwijl u de stelschroef stevig vasthoudt (zie Afb. 6).

**TIP:** Neem bij twijfel contact op met de klantenservice. Veranderingen in de reminstelling kunnen leiden tot een verminderd remvermogen.

## DE WANDELKAR OPVOUWEN EN OPSLAAN

1. Trek de riem in het midden van de stoel omhoog om de wandelkar op te vouwen – Afb. 7.



### ONDERHOUD

1. Zorg ervoor dat ALLE onderdelen altijd goed zijn vastgedraaid.
2. Controleer of de schroeven, knoppen en klemknoppen op de wielen en bewegende wielen goed zijn vastgedraaid. Controleer of de rem correct werkt en of de handvatten correct zijn vastgemaakt.
3. Versleten of beschadigde onderdelen moeten onmiddellijk worden vervangen.

### REINIGING

Gebruik een vochtige doek of spons en warm zeepsop om de wandelkar schoon te maken. Indien nodig kunt u ook veelgebruikte ontsmettingsmiddelen gebruiken. Zorg ervoor dat er geen water of wasmiddelresten achterblijven op de gereinigde oppervlakken en dat ze niet glad zijn. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen of krasgereedschap – deze kunnen de laklaag beschadigen.



## GARANTIE KAART

Model:.....

Serienummer:.....

Date d'achat :.....

Stempel van het verkooppunt  
en een leesbare handtekening van de verkoper:.....

1. ANTAR Sp. J., 03-068 Warschau, Zawisłajska 43, geeft hierbij een garantie van 12 maanden op de rolator, vanaf de datum van aankoop van het product door de koper.
2. Tijdens de garantieperiode verbindt ANTAR zich ertoe de nodige reparaties uit te voeren om de goede werking van het product te herstellen, binnen 14 dagen na de datum van ontvangst van het product door het servicecentrum, samen met het aankoopbewijs en de garantiekaart.
3. ANTAR behoudt zich het recht voor om het product te vervangen als de reparatiekosten niet rendabel worden geacht. Reparatie of vervanging van defecte producten leidt niet tot een verlenging van de garantieperiode.
4. Indien een product defect blijkt te zijn, moet het onmiddellijk worden verzonden naar ANTAR-adres (zie punt 1) of neem contact op met het verkooppunt.
5. Lees voor gebruik de instructies zorgvuldig door en volg ze op. Gebruik van het product in strijd met het beoogde gebruik en aanbevelingen maakt de garantie onherroepelijk ongeldig.
6. De garantie dekt geen schade veroorzaakt door externe mechanische kracht, belasting die het maximaal toegestane gewicht van de gebruiker, zoals beschreven in de handleiding, overschrijdt, evenals contact van het product met alcohol, vette stoffen of benzine.
7. Het product dat in verband met de klacht aan de dienst wordt geleverd, mag geen epidemie veroorzaken.
8. DEZE GARANTIE IS ALLEEN GELDIG SAMEN MET HET AANKOOPBEWIJS (REKENING, KWITANTIE, FACTUUR). IN GEVAL VAN EEN KLACHT MOET EEN AANKOOPBEWIJS WORDEN BIJGEVOEGD.
9. Klachten die worden ingediend zonder aankoopbewijs en een garantiekaart met het serienummer van het product worden niet in behandeling genomen.



**ANTAR Sp. J.**  
03-068 Warszawa  
ul. Zawisłajska 43  
Polska  
Tél.: +48 22 518 36 00  
Fax: +48 22 518 36 30  
[www.antar.net](http://www.antar.net)

